

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

XLR8 · XLR8+ · UNO+

CARACTERÍSTICAS

Modo de terapia

“C” = Continua
“V” = Variable
“I” = Intermitente

Tiempo de tratamiento

Indica el tiempo que la terapia ha estado en funcionamiento.

Presión objetivo

Fecha y hora

Estado del bloqueo/desbloqueo del teclado

Rojo = Bloqueado
Verde = Desbloqueado

Botón de encendido/apagado

Botón de bloqueo/desbloqueo

Entrada de alimentación
Se utiliza para cargar el dispositivo.

Notificación de alerta

El ícono aparece cada vez que ocurre un evento (Alerta de fuga, Revisar apósito, Obstrucción, Canister lleno o Batería baja). Las alertas pueden reconocerse presionando Menú (Menu) - Configuración de alertas (Alert Setup) - Registro de alertas (Alert Log). Seleccione cada alerta y presione Menú (Menu) para borrarla.

Indicador de batería

Intensidad de succión

Barras verdes = El sellado es adecuado.

Barras rojas = El sellado puede estar comprometido.

Estado del sistema

Marca de verificación verde (✓) = Funcionamiento correcto.

Signo de exclamación rojo (!) = Problema.


Ícono de advertencia = Posible fuga pequeña en el apósito.

Botón Menú/Seleccionar

Presione para silenciar las alertas o confirmar los cambios del usuario.

Botón Salir/Cancelar

Presione para regresar a la pantalla anterior o a la pantalla principal.

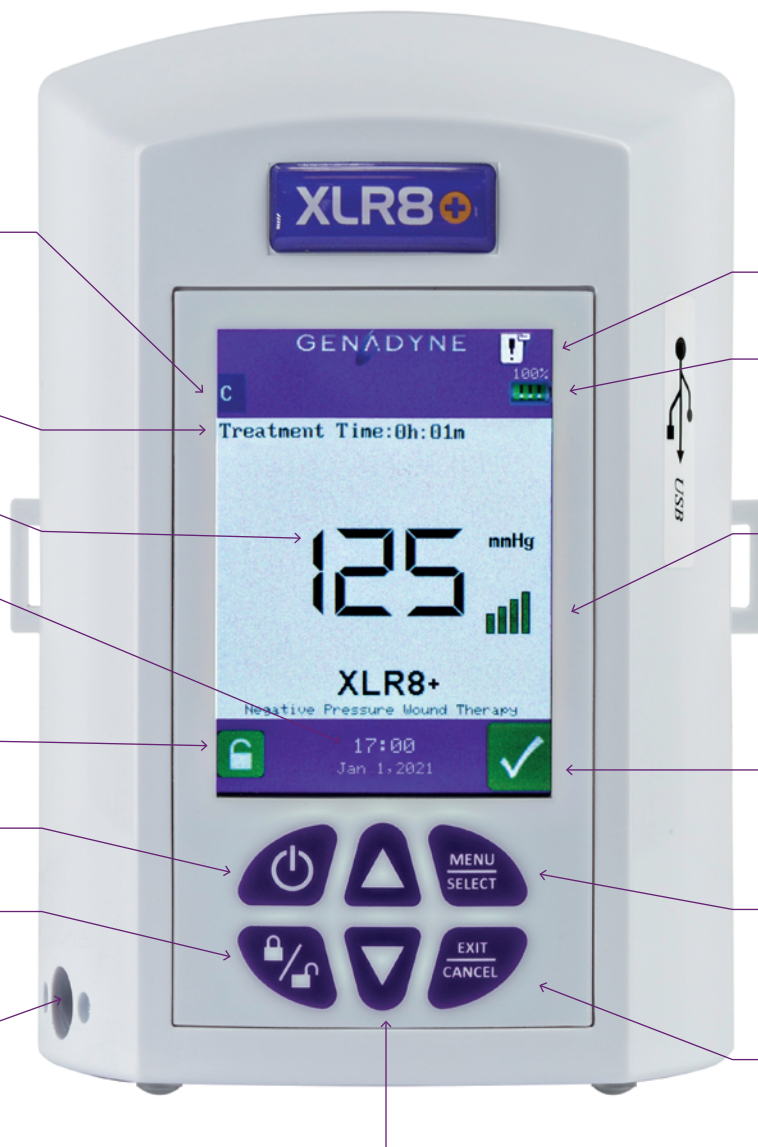

Botones de flecha arriba/abajo

Presione en la pantalla principal para aumentar o disminuir el ajuste de presión.

En la pantalla de Menú/Seleccionar, presione para desplazarse por el menú y ejecutar las funciones.

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

XLR8 · XLR8+

Encendido y apagado

(Power On/Off)

Presione el botón **On/Off**.

Nota: La bomba no se apagará si está en modo **Bloqueado (Locked)**.

Ajustar la configuración de presión

(Adjust Pressure Setting)

Presione la **Flecha hacia arriba** (Up Arrow) para aumentar la presión de vacío en incrementos de 1 mmHg.

Presione la **Flecha hacia abajo** (Down Arrow) para disminuir la presión de vacío en incrementos de 1 mmHg.

Mantenga presionadas las **Flechas hacia arriba/abajo** (Up/Down Arrow) para aumentar o disminuir la presión en incrementos de 10 mmHg.

Configurar la presión variable

(Setting Variable Pressure)

Presione **Menu/Select**.

Presione **Up/Down** para resaltar Treatment Mode (Modo de tratamiento) y luego presione **Menu/Select**.

Presione **Up/Down** para resaltar Variable (Variable) y luego presione **Menu/Select**.

Presione **Up/Down** para seleccionar los tiempos de tratamiento preestablecidos: 12/30, 80/30 y 125/0.

Presione **Menu/Select** para confirmar.

Configuración personalizada de la presión variable

(For Custom Variable Pressure Setting)

CONFIGURAR EL TIEMPO DE PRESIÓN ALTA VARIABLE (SET VARIABLE HIGH PRESSURE TIME):

Presione **Up/Down** para ajustar el tiempo en incrementos de 1 minuto. Puede configurarse de 1 a 15 minutos. Para confirmar el tiempo, presione **Menu/Select**.

CONFIGURAR LA PRESIÓN ALTA VARIABLE (SET VARIABLE HIGH PRESSURE):

Presione **Up/Down** para establecer la presión alta deseada. Para confirmar la presión alta, presione **Menu/Select**.

CONFIGURAR EL TIEMPO DE PRESIÓN BAJA VARIABLE (SET VARIABLE LOW PRESSURE TIME):

Presione **Up/Down** para ajustar el tiempo en incrementos de 1 minuto. Puede configurarse de 1 a 15 minutos. Para confirmar el tiempo, presione **Menu/Select**.

CONFIGURAR LA PRESIÓN BAJA VARIABLE (SET VARIABLE LOW PRESSURE):

Presione **Up/Down** para establecer la presión baja deseada. Para confirmar la presión baja, presione **Menu/Select**.

Silenciar la alerta

(Silence Alert)

Presione **Menu/Select**.

Nota: La alerta volverá a sonar después de 5 minutos si el problema no se ha resuelto.

Restablecer el tiempo de tratamiento

(Reset Treatment Time)

Mantenga presionado **Menu/Select**.

Presione y SUELTE **On/Off**.

Presione y SUELTE **Lock/Unlock (Bloquear/Desbloquear)**.

SUELTE **Menu/Select**.

Bloquear y desbloquear la bomba

(Lock/Unlock Pump)

Mantenga presionados simultáneamente **Lock/Unlock** y **Exit/Cancel** durante 5 segundos.

Cuando está desbloqueada: aparecerá un **ícono verde de candado abierto** en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD.

Cuando está bloqueada: aparecerá un **ícono rojo de candado cerrado** en la esquina inferior izquierda de la pantalla LCD.

Una pantalla bloqueada impide al usuario realizar cambios en la configuración de la bomba.

Configurar el modo de intensidad

(Setting Intensity Mode)

Presione **Menu/Select**.

Presione la **Flecha hacia arriba o hacia abajo (Up/Down Arrow)** y resalte Intensity (Intensidad).

Presione **Menu/Select**.

Presione la **Flecha hacia arriba o hacia abajo (Up/Down Arrow)** para establecer la intensidad en 1, 2 o 3 (de baja a alta).

Presione **Menu/Select** para confirmar la configuración de intensidad.

Borrar el registro de alertas

(Clear Alert Log)

El usuario DEBE estar en la pantalla principal.

Mantenga presionado **Menu/Select**.

Presione y SUELTE **Lock/Unlock**.

Presione y SUELTE **Exit/Cancel**.

SUELTE **Menu/Select**.

DMR-03-093-ES Rev E