


GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

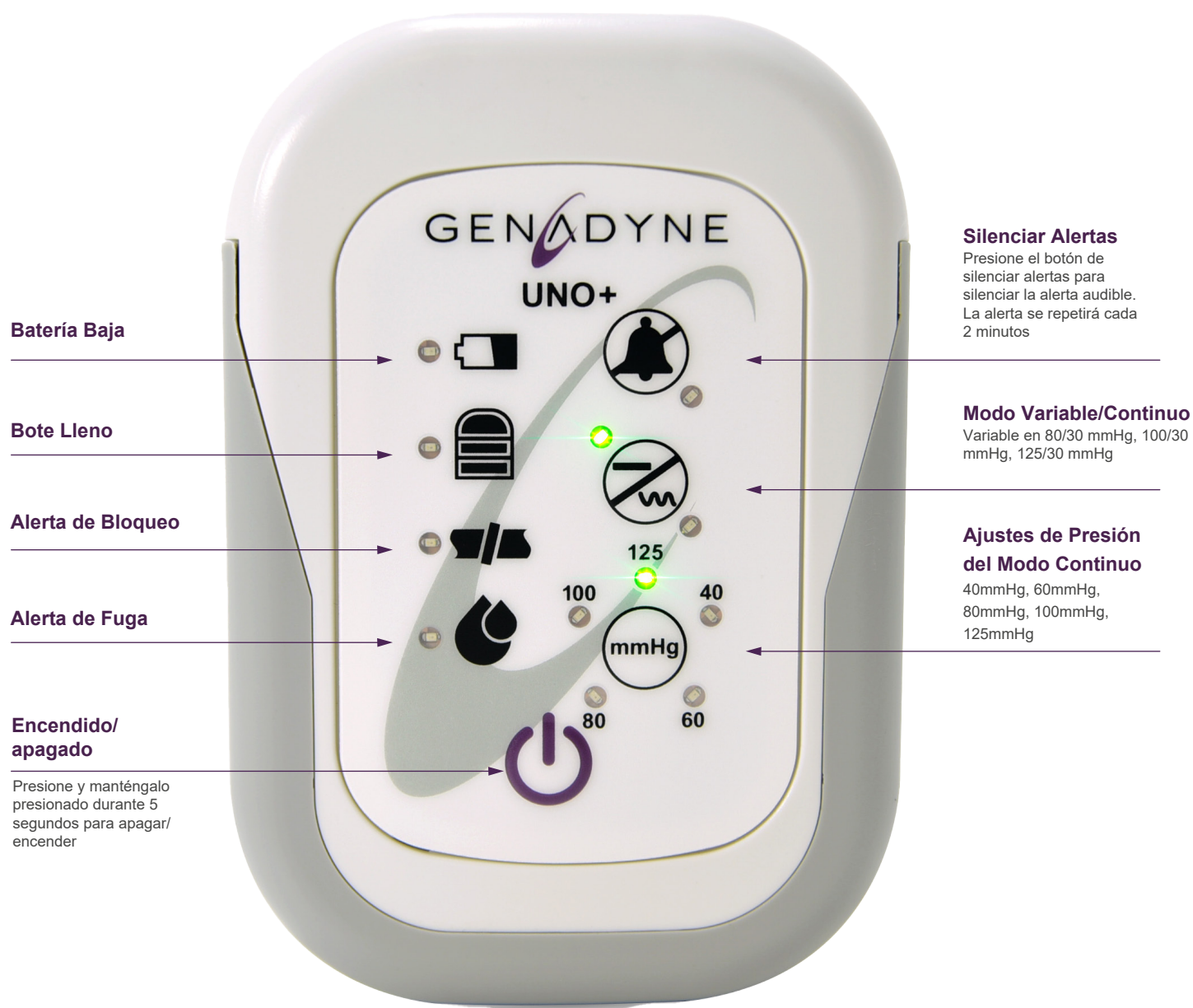

¿PREGUNTAS?

Llamar: +1.800.208.2025 or +1.516.487.8787

Email: info@genadyne.com | www.genadyne.com

the power to *heal*

UNO+

GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA

GENADYNE

BOTONES



Cómo Encender y apagar el UNO+

Mantenga presionado el **Botón de Encendido** por 3 segundos para **ENCENDER/APAGAR** el dispositivo UNO+.



Bloquear y desbloquear el teclado

El dispositivo **UNO+** puede bloquear y desbloquear su teclado presionando y manteniendo presionado de **Silenciar Alerta** durante 5 segundos en cualquier momento durante la terapia.



Modo de Dormir /Ahorro de Energía

El dispositivo entra en modo **Dormir/Ahorro de Energía** después de 2 minutos de inactividad. Mantenga presionado cualquier botón durante 1 segundo; después, el dispositivo dejará de estar en modo **Ahorro de Energía**. Presione el **Botón Deseado** para cambiar la configuración de la terapia.



Selección de Ajuste de Presión/Modo

Seleccione la presión deseada presionando el botón de Terapia. Si el LED está encendida del lado izquierdo, el dispositivo está en modo continuo. Si el LED está encendida del lado derecho, el dispositivo está en modo variable. Para cambiar del modo continuo a variable, presione el **Botón de Presión/Modo**.



Selección de la Presión de la Terapia

Seleccione la presión de terapia entre 40 mmHg, 60 mmHg, 80 mmHg, 100 mmHg o 125 mmHg presionando el **Botón de Configuración de presión**. La luz LED verde junto al botón indicará la presión seleccionada. Las opciones del modo variable son: 125 mmHg/30 mmHg, 100 mmHg/30 mmHg y 80 mmHg/30 mmHg. Para seleccionar la presiones variables preprogramadas, presione el botón de Modo Terapia y seleccione Variable. Luego, presione el botón de configuración de presión y seleccione 125 mmHg, 100 mmHg o 80 mmHg. La presión cambiará cada 3 minutos.



Solución de Problemas de Alertas

Si el dispositivo UNO+ comienza a emitir alertas, use la Guía de Solución de Problemas

COSAS QUE DEBES SABER

Carga de la batería

- Utilice únicamente el cargador USB y el cable USB proporcionados con el dispositivo UNO+.
- PRECAUCIÓN: No coloque el dispositivo en su estuche de transporte durante la carga de la batería.
- Conecte el cable USB al cargador. Asegúrese de que esté bien conectado.
- Conecte el cargador USB a una toma de corriente cercana. Conecte el cable USB a la parte inferior del dispositivo UNO+ NPWT (ranura debajo del botón de encendido).
- Deje que el dispositivo se cargue durante aproximadamente 5 horas. La luz LED parpadeará cada 3 segundos, lo que indica que el dispositivo se está cargando. Después de 5 horas, la batería estará completamente cargada y la luz LED junto al icono de batería baja permanecerá encendido mientras el cargador esté conectado. Una vez que el cargador se desconecte del dispositivo, la luz LED se apagará.

Insertar Bote

Coloque el bote recolector en la parte posterior del dispositivo. Deslícelo hacia adentro y asegúrese de que haga clic para asegurar que está bien sujeto.

Extracción y Reemplazo del Bote

Apague el dispositivo **UNO+**. Deslice la abrazadera del tubo del apósito cerca de la conexión del tubo al bote recolector. Cierre la abrazadera. Desconecte el tubo del puerto del bote recolector. Si lo está utilizando, sáquelo del estuche. Tire de la pestaña lateral del bote recolector para removerlo. Instale un bote nuevo. Vuelva a conectar el tubo del apósito al puerto del bote. Si lo está utilizando, guarde el dispositivo en el estuche. Suelte la abrazadera del tubo. Encienda de vuelta el dispositivo UNO+.

¿PREGUNTAS?

Llamar: +1.800.208.2025 or +1.516.487.8787

Email: info@genadyne.com | www.genadyne.com

the power to heal